



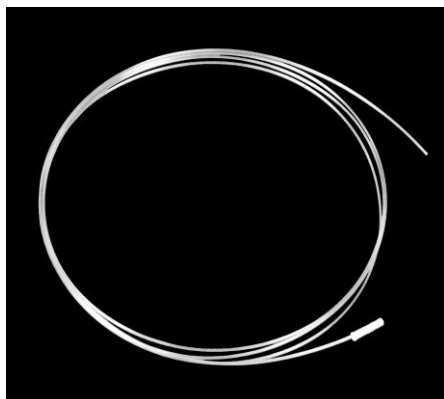


hygiena

Helping Hospitals Define Clean

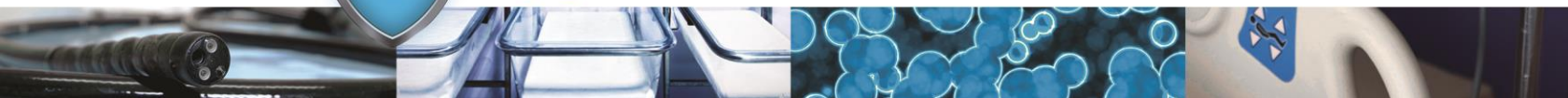

EndoSwab | 内窥镜拭子

Hygiena 公司的 EndoSwab 可用于验证特殊设备的清洁效果，比如
瞄具或者那些带有内部管道的可重复使用的设备，而其内部管道是
难以接触的。拭子由一个吸收性泡沫头和一个细长的易弯曲的拭子
杆所构成。采样后，将拭子头脱离并使用 Hygiena ATP 荧光仪验证
清洁后的所有的残留污染物，以确保瞄具和其它可重复使用设备的
安全性以及清洁程序的有效性。

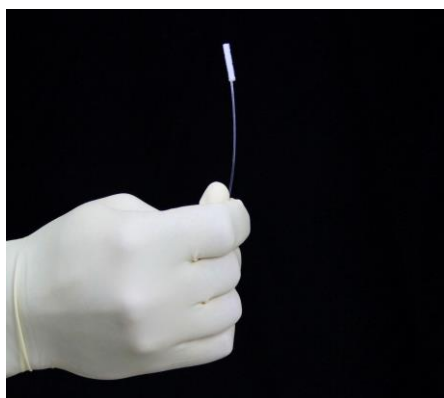


优势：

- 结果 15 秒可得；
- 海绵头长 3 mm，可最大程度地回收样品；
- 拭子杆长 2.4 m，能够保证回收内窥镜大部分长度上的有代表性的样品；
- 灭菌包装；
- 单次使用，独立包装。

适用性：

- 根据所要求的灵敏度，选择使用 Hygiena UltraSnap ATP 检测拭子
或 SuperSnap 高灵敏 ATP 检测拭子。

内窥镜拭子操作说明：

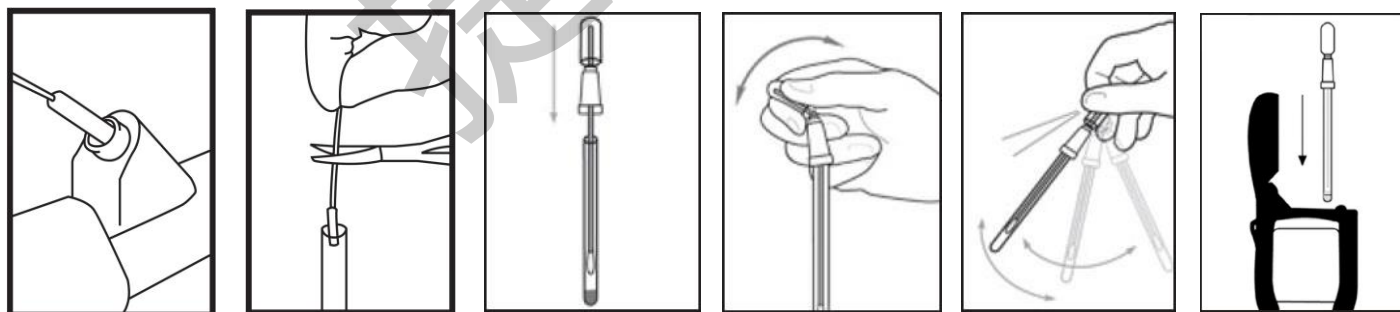

货号	说明	数量
ENDOSWAB	Endoswab - 内窥镜清洁验证用拭子	100
US2020	UltraSnap ATP 检测拭子	100
SUS3000	SuperSnap 高灵敏 ATP 检测拭子	100
SS3	SystemSURE Plus ATP 清洁验证系统	1

